

Blutzucker- messung mit STADA Gluco Result®

Kurzanleitung zur Blutzuckermessung

Einfache Schritte



Blutzuckertest



1 Waschen Sie sich die Hände mit warmem Seifenwasser.



2 Nehmen Sie einen Teststreifen aus dem Behälter und verschließen Sie diesen sofort wieder. Führen Sie den Teststreifen so in die Testöffnung ein, dass die Kontakte (Metallblöcke) nach oben zeigen. Das Messgerät schaltet sich ein.




3 Stechen Sie in die Fingerspitze. Zur Verwendung an nur einem Patienten bestimmt.



4 Halten Sie die Spitze des in das Messgerät eingeführten Teststreifens an den Blutropfen, sodass das Blut in den Teststreifen eingesogen werden kann. Nehmen Sie den Streifen vom Tropfen weg, sobald das Messgerät piept. Auf dem Display erscheinen Striche, während das Messgerät misst.



5 Nach wenigen Sekunden wird das Messergebnis mit der Uhrzeit angezeigt.

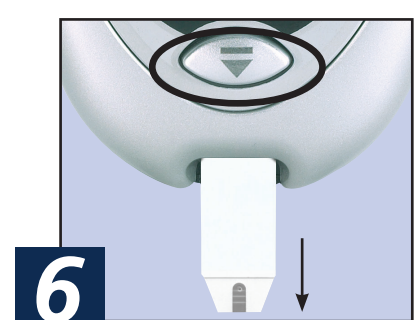

6 Halten Sie das Messgerät senkrecht, sodass der Teststreifen nach unten zeigt. Drücken Sie die Auswurf-taste, um den Teststreifen zu entfernen und entsorgen Sie diesen in einem geeigneten Behälter.

Dieser Leitfaden gibt einen kurzen Überblick zur Blutzuckerbestimmung. Anweisungen zum Einrichten des Messgeräts und Einstellen von Datum und Uhrzeit finden Sie im Abschnitt „Erste Schritte“ im Benutzerhandbuch. Für ausführliche Informationen zum kompletten Blutzucker-Messverfahren schlagen Sie bitte im Abschnitt „Blutzuckertest“ im Benutzerhandbuch nach.

WARNUNG! Nach dem Öffnen des Teststreifenkartons muss das Produkt auf fehlende, beschädigte oder gebrochene Teile überprüft werden. Vergewissern Sie sich, dass der Teststreifenbehälter fest verschlossen ist. Wenn das Produkt beschädigt oder der Deckel nicht fest verschlossen ist, dürfen die Teststreifen NICHT für Untersuchungen verwendet werden, da die Ergebnisse falsch sein könnten.

Vertrieb:
STADAPHARM GmbH
Stadastr. 2-18
D-61118 Bad Vilbel
diabetes@stadapharm.de
www.stadapharm.de/diabetes
Servicenummer Diabetes:
06101 603 9000

EC REP **EMERGO EUROPE**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CE0197


TRIVIDIA HEALTH, INC.
2400 N.W. 55TH COURT
FORT LAUDERDALE, FL 33309 U.S.A.

Checking Your Blood Glucose Using STADA Gluco Result®

A guide for testing your blood glucose

Simple Steps to Test Your Blood Glucose

Meter, Test Strips & System Components

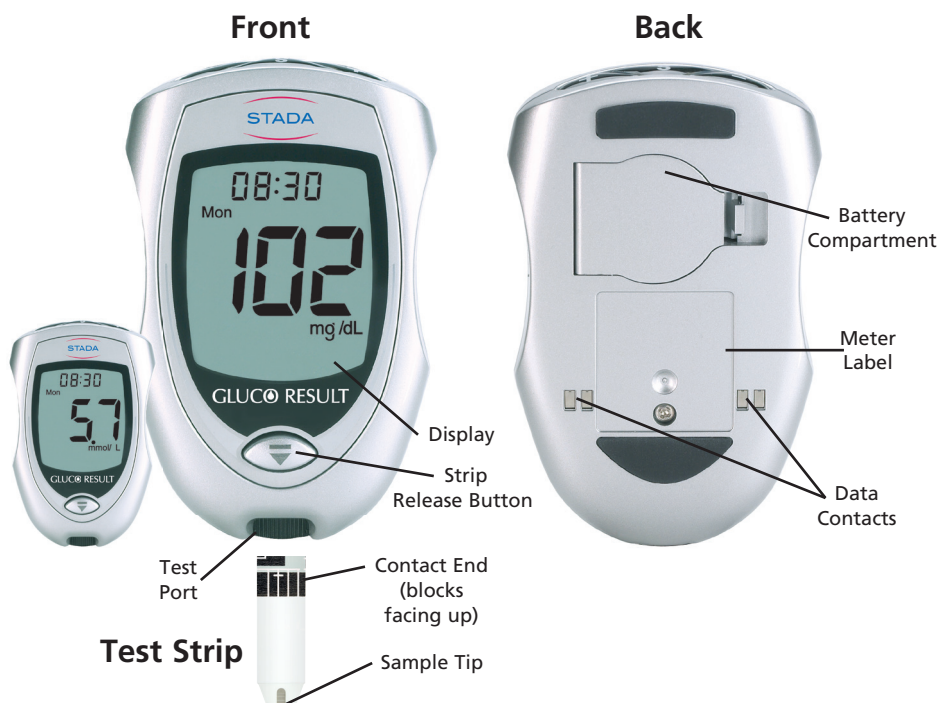

Blood Glucose Testing



1

Wash your hands with warm, soapy water.



2

Remove Test Strip from vial and close vial immediately. Insert Test Strip into Test Port with Contact End (blocks facing up). The Meter turns on.



3

Lance your finger. For single patient use only.




4

With Test Strip still in Meter, touch Sample Tip to top of blood drop and allow blood to be drawn into Test Strip. Remove from blood drop immediately after the Meter beeps and dashes appear across Meter Display.



5

In as fast as 4 seconds, glucose result will be displayed with time.

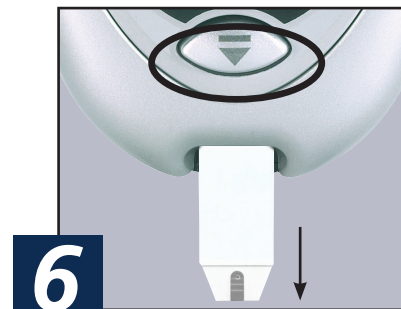

6

Hold Meter with Test Strip pointing down. Press Strip Release Button to discard Test Strip in the appropriate container.

This guide provides a brief overview on testing your blood glucose. If you need information about setting up your Meter with correct date and time, consult the "Getting Started" section of Owner's Booklet. For more detailed information on complete blood glucose testing procedure, consult "Testing Blood" section in the Owner's Booklet.

WARNING! Upon opening the test strip carton, examine the product for missing, damaged or broken parts. Ensure the test strip container is securely closed. If the product is damaged or the lid is not closed, DO NOT use the test strips for testing; product may give inaccurate results.

Vertrieb:
STADAPHARM GmbH
Stadastr. 2-18
D-61118 Bad Vilbel
diabetes@stadapharm.de
www.stadapharm.de/diabetes
Servicenummer Diabetes:
06101 603 9000

EC REP **EMERGO EUROPE**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CE0197

TRIVIDIA HEALTH, INC.
2400 N.W. 55TH COURT
FORT LAUDERDALE, FL 33309 U.S.A.

Blutzucker- messung mit STADA Gluco Result To Go® Plus

Kurzanleitung zur Blutzuckerbestimmung

Einfache Schritte

Messgerät, Teststreifen und Systemkomponenten



***Das Messgerät kann sich entzünden und/oder die Batterie kann explodieren, wenn es an einen Adapter oder an eine Steckdose angeschlossen wird, um die Batterie aufzuladen oder das Messgerät mit Strom zu versorgen.**

****Der USB-Anschluss ist nur zur Datenübertragung gedacht; Messgerät/Batterie darf NICHT über diesen Anschluss betrieben/aufgeladen werden.**

Blutzuckertest



1

Waschen Sie sich die Hände mit warmem Seifenwasser.



2

Nehmen Sie einen Teststreifen aus dem Behälter und verschließen Sie diesen sofort wieder. Führen Sie den Teststreifen so in die Testöffnung ein, dass die Kontakte (Metallblöcke) nach oben zeigen. Das Messgerät schaltet sich ein.



3

Stechen Sie in die Fingerspitze. Zur Verwendung an nur einem Patienten bestimmt.



4

Halten Sie die Spitze des in das Messgerät eingeführten Teststreifens an den Blutropfen, sodass das Blut in den Teststreifen eingesogen werden kann. Nehmen Sie den Streifen vom Tropfen weg, sobald die Striche auf dem Display des Messgeräts erscheinen.



5

Nach wenigen Sekunden wird das Messergebnis angezeigt. Entsorgen Sie den Teststreifen in einem geeigneten Behälter.

Wechseln der Batterie



Drehen Sie das Messgerät um, sodass Sie das Etikett sehen. Das Symbol zeigt auf das Batteriefach. Ziehen Sie das Batteriefach ganz heraus, sodass die Batterie freiliegt. Ersetzen Sie die Batterie.

***Verwenden Sie eine nicht wieder aufladbare 3V-Lithiumbatterie (Typ CR2032).**

Dieser Leitfaden gibt einen kurzen Überblick zur Blutzuckerbestimmung. Anweisungen zum Einrichten des Messgeräts und Einstellen von Datum und Uhrzeit finden Sie im Abschnitt „Erste Schritte“ im Benutzerhandbuch. Für ausführliche Informationen zum kompletten Blutzucker-Messverfahren schlagen Sie bitte im Abschnitt „Blutzuckertest“ im Benutzerhandbuch nach. **WARNUNG!** Nach dem Öffnen des Teststreifenkartons muss das Produkt auf fehlende, beschädigte oder gebrochene Teile überprüft werden. Vergewissern Sie sich, dass der Teststreifenbehälter fest verschlossen ist. Wenn das Produkt beschädigt oder der Deckel nicht fest verschlossen ist, dürfen die Teststreifen NICHT für Untersuchungen verwendet werden, da die Ergebnisse falsch sein könnten.

© 2019 Trividia Health, Inc. • Q4STA08FD Rev. 42 • 9261049 1904

Vertrieb:
STADAPHARM GmbH
Stadastr. 2–18
D-61118 Bad Vilbel
diabetes@stadapharm.de
www.stadapharm.de/diabetes
Servicenummer Diabetes:
06101 603 9000

EC REP EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CE0197

TRIVIDIA HEALTH, INC.
2400 N.W. 55TH COURT
FORT LAUDERDALE, FL 33309 U.S.A.

Checking Your Blood Glucose Using STADA Gluco Result To Go® Plus

A guide for testing your blood glucose

Simple Steps to Test Your Blood Glucose

Meter, Test Strips & System Components



***Trying to recharge the battery or power the meter by plugging into an adaptor or an electrical outlet may cause meter to catch on fire and/or battery may explode.**

****USB Port For Data Download Only DO NOT use to charge battery or meter.**

Blood Glucose Testing



1

Wash your hands with warm, soapy water.



2

Remove Test Strip from vial and close vial immediately. Insert Test Strip into Test Port with Contact End (blocks facing up). The Meter turns on.



3

Lance your finger. For single patient use only.



4

With Test Strip still in Meter, touch Sample Tip to top of blood drop and allow blood to be drawn into Test Strip. Remove from blood drop immediately after dashes appear across Meter Display.



5

In as fast as 4 seconds, glucose result will be displayed. Discard Test Strip in the appropriate container.

Changing Battery



Turn Meter over until the Meter label is facing up. Look for Battery Tray symbol ▼ on Meter label and pull Battery Tray out until battery is exposed. Replace battery.

***Meter uses CR2032 non-rechargeable battery**

This guide provides a brief overview on testing your blood glucose. If you need information about setting up your Meter with correct date and time, consult the "Getting Started" section of Owner's Booklet. For more detailed information on complete blood glucose testing procedure, consult "Testing Blood" section in the Owner's Booklet.

WARNING! Upon opening the test strip carton, examine the product for missing, damaged or broken parts. Ensure the test strip container is securely closed. If the product is damaged or the lid is not closed, DO NOT use the test strips for testing; product may give inaccurate results.

© 2019 Trividia Health, Inc. • Q4STA08FD Rev. 42 • 9261049 1904

Vertrieb:
STADAPHARM GmbH
Stadastr. 2-18
D-61118 Bad Vilbel
diabetes@stadapharm.de
www.stadapharm.de/diabetes
Servicenummer Diabetes:
06101 603 9000

EC REP EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CE0197

TRIVIDIA HEALTH, INC.
2400 N.W. 55TH COURT
FORT LAUDERDALE, FL 33309 U.S.A.